

Szybki start (krok po kroku)

- Naładuj urządzenie**
 - Podłącz urządzenie do ładowarki i upewnij się, że bateria jest w pełni naładowana przed pierwszym użyciem.
 - Przed uruchomieniem odłącz urządzenie od ładowarki.
- Przygotowanie urządzenia**
 - Zdejmij plastikowy pierścień z głowicy. (Pierścień jest potrzebny tylko w trybie Clean, w pozostałych trybach należy go zdjąć).
- Przygotowanie skóry**
 - Dokładnie oczyść twarz (zmyj makijaż, przemyj ją delikatnym żelem/pianką).
 - Osusz twarz ręcznikiem, usuń biżuterię i soczewki kontaktowe.
- Nałóż żel/preparat na skórę**
 - Stosuj żel do ultradźwięków lub dedykowany preparat do zabiegów kosmetycznych (w zależności od trybu).
 - Rozprowadź cienką warstwę w obszarze zabiegowym.
- Włączanie urządzenia**
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE przez ok. 2-3 sekundy.
 - Urządzenie uruchomi się w pierwszym trybie Clean.
- Wybór trybu pracy**
 - Krótkie naciśnięcie przycisku MODE przełącza między trybami (Clean, Cool, EMS Lifting, Moisturizing, CoSyntesis).
 - Jeśli wybierasz tryb Clean, nałóż na głowicę wacik kosmetyczny i zabezpiecz go plastikowym pierścieniem.
- Regulacja intensywności (LEVEL)**
 - Ustaw poziom intensywności zaczynając od poziomu 1 i zwiększaj stopniowo, obserwując reakcję skóry (dotyczy zwłaszcza trybów z EMS).
- Aktywacja fototerapii LED (opcjonalnie)**
 - Naciśnij przycisk LED, aby włączyć światło (czerwone lub niebieskie).
 - Krótkie przyciśnięcia mogą zmieniać kolor światła LED.
- Przeprowadzenie zabiegu**
 - Przesuwaj głowicę po skórze twarzy kolistymi lub posuwistymi ruchami (patrz Schematy pielęgnacji).
 - Nie przytrzymuj głowicy dłużej niż 2-3 sekundy (za wyjątkiem chłodzenia w trybie Cool, gdzie można chwilę schłodzić wybrany obszar).
 - W trybach z EMS stosuj żel przewodzący.
 - Omijaj bezpośrednią okolicę tarczycy i powiek.
- Zakończenie zabiegu**
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE przez 2-3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.
 - Urządzenie może chłodzić się jeszcze przez kilkadziesiąt sekund.
 - Oczyść głowicę miękką ściereczką lub wacikiem kosmetycznym lekko zwilżonym 70% alkoholem izopropylowym lub wodą z łagodnym środkiem; nie zalewać; omijaj port ładowania; bez środków ściernych.

Ważne wskazówki

- Pierścień blokujący wacik jest potrzebny tylko w trybie Clean, w pozostałych trybach należy go zdjąć.
- Nakładaj świeżą warstwę preparatu przed uruchomieniem urządzenia. W razie wysychania aplikuj kolejną porcję dla lepszego poślizgu i skuteczności.
- Unikaj kosmetyków z olejami, parafiną i silikonami, które mogą blokować przewodzenie fal i impulsów.
- Fototerapię LED można stosować w każdym trybie – czerwone światło pobudza kolagen, a niebieskie działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia.
- Po zabiegu oczyść skórę np. płynem micelarnym, a następnie kontynuuj pielęgnację.
- Zaczynaj od niskich ustawień intensywności i stopniowo je zwiększaj, obserwując reakcję skóry.
- Dla lepszego poślizgu i skuteczności można mieszać serum/ampułki z żelem przewodzącym.

Schematy pielęgnacji

Codzienna pielęgnacja oczyszczająca (3–7 razy w tygodniu)
Zalecany zestaw: Clean – 5 minut (1 cykl) + Moisturizing* – 5 minut (1 cykl)

Przykładowy przebieg:

- Nałóż cienką warstwę żelu oczyszczającego i uruchom tryb Clean na 5 minut, równomiernie przesuwając głowicę po skórze twarzy.
 - Dla cery tłustej/mieszanej: Stosuj codziennie, aby regulować wydzielanie sebum.
 - Dla cery suchej/wrażliwej: Stosuj 3–5 razy w tygodniu, aby uniknąć nadmiernego przesuszenia.

*Jeśli skóra wymaga dodatkowego nawilżenia, po zakończeniu oczyszczania można przejść do trybu Moisturizing (maksymalnie 2 razy w tygodniu).

Lifting i ujędrnienie skóry (1–2 razy w tygodniu)

Zalecany zestaw: EMS Lifting – 5 minut (1 cykl) + Cool – 4 minuty (2 cykle po 2 minuty)

Przykładowy przebieg:

- Nałóż żel przewodzący i uruchom tryb EMS Lifting na 5 minut, przesuwając głowicę wzdłuż linii mięśni twarzy.
- Po zakończeniu liftingu przejdź do trybu Cool na 5 minut, aby uspokoić skórę i zamknąć pory.
 - Najlepiej stosować 1–2 razy w tygodniu, aby regularnie pobudzać mięśnie twarzy i poprawiać owal.

Synteza kolagenu i wygładzenie skóry (1 raz w tygodniu)

Zalecany zestaw: CoSyntesis – 4–6 minut (2–3 cykle po 2 minuty)

Przykładowy przebieg:

- Nałóż serum przeciwstarzeniowe i uruchom tryb CoSyntesis na 4–6 minut, skupiając się na obszarach wymagających intensywniejszej regeneracji.
- Po zakończeniu zabiegu nałóż krem nawilżający lub przeciwzmarszczkowy.
- Najlepiej stosować 1 raz w tygodniu, aby pobudzić fibroblasty do produkcji kolagenu i poprawić elastyczność skóry.

Proponowane ruchy urządzenia

- Linia żuchwy i szyja**
 - Przesuwaj głowicę od podbródka w kierunku uszu, następnie delikatnie w dół szyi.
 - Nie przytrzymuj urządzenia w jednym miejscu dłużej niż 2–3 sekundy.
- Kontur twarzy**
 - Od czubka brody wzdłuż linii żuchwy do skroni.
- Policzki**
 - Od nozdrzy przez policzki aż do skroni.
- Okolice oczu**
 - Delikatne ruchy od wewnętrznego kąca oka w kierunku skroni.
 - Zachowaj ostrożność, by nie zbliżyć się zbyt blisko powiek.
- Czoło**
 - Unieś skórę od linii brwi ku górze w kierunku nasady włosów.
 - Powtórz każdy ruch 2–3 razy, w zależności od potrzeb.

Informacje prawne i środowiskowe

Urządzenie nie jest wyrobem medycznym. Przeznaczone wyłącznie do pielęgnacji kosmetycznej.

Nie zdejmuj płomby (niebieskiej naklejki) z głowicy przed decyzją o zatrzymaniu produktu. Urządzenie możesz sprawdzić bez kontaktu ze skórą. Zerwanie płomby co do zasady wykracza poza „sprawdzenie jak w sklepie” i może skutkować obniżeniem kwoty zwrotu proporcjonalnie do zmniejszenia wartości (szczegóły: <https://skinheaven.pl/regulamin/>).

Gwarancja producenta

- 2 lata od dostarczenia towaru — obejmuje wady materiałowe lub wykonawcze ujawnione w okresie gwarancyjnym przy użytkowaniu zgodnym z instrukcją; nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych, zalania, ingerencji/napraw oraz normalnego zużycia; nie ogranicza praw z rękojmiami.

Rękojmia (sprzedawca):

- 2 lata od dostarczenia towaru — uprawnienia konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.

Zasady i sposób składania reklamacji

- Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne w ramach gwarancji należy kierować poprzez formularz reklamacyjny dostępny na stronie: <https://skinheaven.pl/formularz-reklamacyjny/>

Deklaracja zgodności

Producent B2B Trading Platform Adrian Rozmus deklaruje, że produkt spełnia wymagania następujących dyrektyw europejskich:

- Dyrektywa EMC (2014/30/UE) – dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej,
- Dyrektywa RoHS (2011/65/UE z późniejszymi zmianami w 2015/863) – ograniczająca stosowanie niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
- Rozporządzenie GPSR (2023/988) – dotyczącym ogólnego bezpieczeństwa produktów.

Pełna deklaracja zgodności jest dostępna u producenta.

Oznaczenie CE

- Produkt posiada oznaczenie CE umieszczone na urządzeniu oraz opakowaniu, co świadczy o jego zgodności z europejskimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Utylizacja (WEEE)

- Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłych pojemników na odpady komunalne!
- Zgodnie z dyrektywą WEEE (2012/19/UE), urządzenie oraz jego akumulator litowo-jonowy nie powinny być wyrzucane do odpadów komunalnych. Po zakończeniu eksploatacji należy przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym w celu bezpiecznej utylizacji.

Opakowania

- Produkt spełnia wymagania Dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.
- Opakowania należy segregować i poddawać recyklingowi w ramach lokalnych systemów selektywnej zbiórki odpadów.

Odpowiedzialność producenta

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z instrukcją użytkowaniem urządzenia.

Producent

B2B Trading Platform Adrian Rozmus
NIP: 6443530906 | BDO: 000686969
ul. Ostrogórska 9, 41-200 Sosnowiec, Polska
tel. 571 909 395 | e-mail: kontakt@skinheaven.pl
Seria: 03.2024
Wyprodukowano w P. R. C.



mezoterapia bezigłowa

FreshSkin PRO

Instrukcja obsługi



Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed pierwszym użyciem.

SkinHeaven™
HEAVEN FOR YOUR SKIN

Wymagania bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całą instrukcją obsługi.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku zewnętrznego (na skórę). Nie wolno używać go w sposób sprzeczny z opisanym przeznaczeniem.
- Urządzenie nie jest odpowiednie dla osób (w tym dzieci) z ograniczoną wrażliwością sensoryczną lub zdolnościami umysłowymi ani dla osób bez doświadczenia i wiedzy na temat jego użytkowania.
- Nie pozostawiaj urządzenia włączonego bez nadzoru.
- W razie wątpliwości dotyczących własnego stanu zdrowia (np. schorzeń kardiologicznych, neurologicznych, posiadania implantów elektrycznych) skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem zabiegów.

Środki ostrożności

1. Po każdym użyciu urządzenia należy je natychmiast wyczyścić wilgotną ściereczką, aby zapobiec gromadzeniu się olejków i resztek żelu, szczególnie na głowicy. Następnie dokładnie osusz urządzenie suchą, miękką szmatką lub ręcznikiem papierowym.
2. Urządzenie posiada wbudowaną baterię, której nie można wymieniać samodzielnie.
3. Należy zachować ostrożność w kontakcie z wodą, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem oraz innych zagrożeń (urządzenie nie jest wodoodporne).

Zakazy

1. Nie rozmontowywać ani nie modyfikować urządzenia – grozi to uszkodzeniem sprzętu i utratą gwarancji, a także może stwarzać zagrożenie dla użytkownika.
2. Nie kieruj światła LED do oczu. W okolicy powiek stosuj wyłącznie przy zamkniętych oczach.
3. Z urządzenia nie powinny korzystać: dzieci (nie dla <16 lat), kobiety w ciąży, osoby z ograniczoną sprawnością ruchową.
4. Nie używać uszkodzonych ładowarek lub wtyczek, które nie pasują prawidłowo. Może to spowodować porażenie , zwarcie lub pożar.
5. Nie kontynuować pracy urządzenia, jeżeli: podczas ładowania lub użytkowania ulegnie ono przegrzaniu – należy natychmiast odłączyć zasilanie.
6. Unikać upadków i uderzeń, które mogą doprowadzić do awarii urządzenia.
7. Nie używaj urządzenia podczas ładowania.
8. Nie przechowuj urządzenia w wilgotnym miejscu.
9. Unikaj zabrudzenia portu ładowania i przewodu zasilającego.
10. Nie używaj urządzenia w przypadku gorączki lub innych ostrych dolegliwości zdrowotnych.
11. Nie stosować urządzenia w przypadku chorób serca, hemofilii, skłonności do alergii lub zapalenia skóry.
12. Nie używaj urządzenia na ranach, po zabiegach chirurgicznych, wewnątrz jamy ustnej, na powiekach i gałkach ocznych, wokół uszu oraz w okolicy tarczycy.

Przeciwwskazania:

- Cięża i okres karmienia piersią
- Rozrusznik serca i inne urządzenia elektryczne/elektroniczne
- Metalowe implanty w okolicy zabiegowej
- Choroby układu krążenia
- Padaczka i zaburzenia neurologiczne
- Nowotwory lub stany przednowotworowe
- Skłonność do krwawień, hemofilia, zaburzenia krzepnięcia
- Stany zapalne, infekcje lub ran w obszarze zabiegowym
- Świeże zabiegi chirurgiczne lub wypełniacze
- Choroby autoimmunologiczne i zaburzenia hormonalne
- Nie używaj przy nadwrażliwości na światło ani podczas kuracji fotocuczulającej
- Inne niestabilizowane choroby przewlekłe

Ostrzeżenia dodatkowe

- Przed zabiegiem zdejmij biżuterię z okolic zabiegowych, aby uniknąć ewentualnych podrażnień lub zakłóceń działania urządzenia.
- Nie używaj urządzenia na błonach śluzowych ani bezpośrednio na gałkach ocznych.
- Skonsultuj się z lekarzem, jeśli masz wątpliwości dotyczące intensywności zabiegów lub występują u Ciebie rzadkie schorzenia.
- Przerwij zabieg w przypadku silnego podrażnienia, bólu, nadmiernego zaczerwienienia lub pieczenia skóry.
- Konsultacja lekarska jest zalecana w razie wszelkich wątpliwości co do stanu zdrowia.
- Przed przeprowadzeniem zabiegu upewnij się, że skóra w obszarze zabiegowym jest zdrowa, bez otwartych ran czy zmian zapalnych.
- W razie wystąpienia niepokojących objawów (np. wysypki, obrzęku) przerwij zabieg i skontaktuj się z lekarzem.

Dane techniczne	
Nazwa produktu	FreshSkin Pro
Wymiary	175 x 55 x 67 mm
Waga	145g
Bateria	Li-ion 3.7 V / 1000 mAh
Wejście (ładowanie):	5 V ≈ max 1 A (USB-C)
Zakres temperatury	6-42°C (±5°C)
Częstotliwość wibracji	10 000 (+10%) rpm
Czas ładowania	2,5h
Moc	8.5W
Czas pracy	Ok 120 min

Technologie i ich zastosowanie

IonFusion (Jonoforeza)

- IonFusion to technologia, która wykorzystuje pole elektryczne do przenikania składników aktywnych w głąb skóry, poprawiając ich skuteczność. W zależności od użytego ładunku jony działają w różny sposób:
- Jony dodatnie (ION+) – przyciągają i usuwają zanieczyszczenia, toksyny oraz nadmiar sebum z porów, co skutecznie oczyszcza skórę i przygotowuje ją do dalszej pielęgnacji.
- Jony ujemne (ION-) – wspomagają wnikanie składników odżywczych, takich jak witaminy czy kwas hialuronowy, głęboko w skórę, co zwiększa ich działanie nawilżające i regenerujące.

Fototerapia LED

- Terapia światłem LED stymuluje regenerację skóry na poziomie komórkowym.
- Czerwone światło (620 nm) – pobudza produkcję kolagenu i elastyn, poprawiając jedność skóry i redukując zmarszczki. Dodatkowo wspomaga regenerację i poprawia mikrokrażenie, co nadaje skórze zdrowy blask.
- Niebieskie światło (470 nm) – działa antybakteryjnie, wspiera pielęgnację cery skłonnej do niedoskonałości (trądziku), ogranicza wydzielanie sebum oraz łagodzi podrażnienia.

Elektrostymulacja EMS


- Technologia EMS wykorzystuje impulsy elektryczne o niskiej częstotliwości do stymulacji mięśni twarzy.
- Impulsy EMS pobudzają mięśnie do pracy, co poprawia napięcie skóry i wzmacnia jej strukturę.
- Regularne stosowanie może pomóc zmniejszyć wrażenie wiotczenia skóry i wspiera utrzymanie wyraźnych konturów twarzy.

SonicLift (Masaż Wibroakustyczny)

- SonicLift to masaż wibroakustyczny, który działa na głębsze warstwy skóry i mięśni twarzy.
- Delikatne wibracje poprawiają krążenie krwi, co przyspiesza usuwanie toksyn i zwiększa dotlenienie skóry.
- Regularne stosowanie masażu rozluźnia napięte mięśnie, co zmniejsza widoczność zmarszczek mimicznych.

Ciepły i Zimny Kompres

- Ciepły kompres – rozszerza pory, pobudza krążenie krwi i ułatwia usuwanie zanieczyszczeń i nadmiaru sebum. Dzięki temu skóra lepiej przyswaja składniki aktywne zawarte w kosmetykach.
- Zimny kompres – obkurcza naczynia krwionośne, zmniejsza obrzęki i zaczerwienienia oraz koi podrażnioną skórę. Pomaga także w zwężaniu porów i ujędrnianiu skóry.

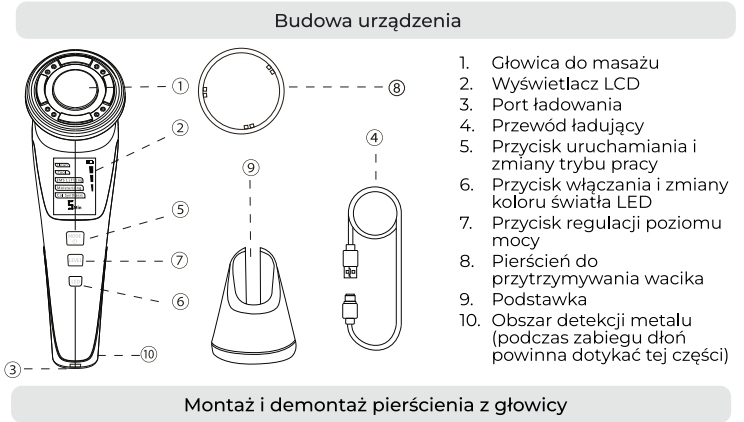

Omówienie trybów i zasady stosowania

Clean (Oczyszczanie) – IonFusion (ION+) + Ciepły Kompres + SonicLift + Fototerapia LED

- **Działanie:** Tryb Clean wykorzystuje ION+, aby usunąć zanieczyszczenia z głębszych warstw skóry. Ciepły kompres rozszerza pory, co zwiększa skuteczność oczyszczania, a SonicLift pobudza mikrokrażenie. Fototerapia LED wspiera regenerację.
- **Efekt:** Skóra jest oczyszczona, odświeżona, pory mniej widoczne. Regularne stosowanie zmniejsza nadmiar sebum i zapobiega niedoskonałościom.
- **Częstotliwość stosowania:** 3-7 razy w tygodniu.
- **Zalecane preparaty:** Pianki i żele oczyszczające, toniki normalizujące pH, delikatne peelingi enzymatyczne.

Cool (Krioterapia) – Zimny Kompres + SonicLift + Fototerapia LED

- **Działanie:** Zimny kompres zwęża pory, SonicLift wspomaga drenaż limfatyczny, a fototerapia LED działa przeciwzapalnie.
- **Efekt:** Skóra jest ukojona, bardziej napięta, zaczerwienienia i obrzęki zredukowane. Regularne stosowanie wyróżnia koloryt i zmniejsza widoczność porów.
- **Częstotliwość stosowania:** 1-2 razy w tygodniu.
- **Zalecane preparaty:** Najlepiej stosować żele łagodzące, zawierające aloes, pantenol lub ekstrakty roślinne o działaniu przeciwzapalnym i kojącym. Dobrze sprawdzi się również lekkie serum nawilżające.

EMS Lifting – Elektrostymulacja EMS + SonicLift + Fototerapia LED

- **Działanie:** EMS pobudza mięśnie twarzy, poprawiając ich napięcie i modelując kontury. SonicLift wspiera regenerację, a fototerapia LED pobudza syntezę kolagenu.
- **Efekt:** Twarz jest bardziej napięta i uniesiona, rysy wyraźniejsze. Regularne stosowanie wspomaga produkcję kolagenu i elastyn, odmładzając skórę.
- **Częstotliwość stosowania:** 1-2 razy w tygodniu.
- **Zalecane preparaty:** Żele przewodzące zwiększające efektywność EMS, serum ujędrniające z peptydami lub kolagenem.

Moisturizing (Nawilżanie) – IonFusion (ION-) + Ciepły Kompres + SonicLift + Fototerapia LED

- **Działanie:** ION- wspomaga wchłanianie składników odżywczych, ciepły kompres poprawia mikrokrażenie, a SonicLift i fototerapia LED wzmacniają efekt pielęgnacyjny.
- **Efekt:** Skóra staje się intensywnie nawilżona, bardziej elastyczna i wygładzona. Cera wygląda zdrowo i promiennie, a drobne linie stają się mniej widoczne.
- **Częstotliwość stosowania:** 1-2 razy w tygodniu.
- **Zalecane preparaty:** Serum lub ampułki nawilżające na bazie kwasu hialuronowego, witamin i antyoksydantów. Lekkie kremy nawilżające bez silikonów i olejów.

ColSynthesis (Synteza Kolagenu) – Zimny Kompres + EMS + Fototerapia LED

- **Działanie:** Tryb ColSynthesis łączy EMS, które pobudza fibroblasty do produkcji kolagenu, zimny kompres, który koi skórę i redukuje stany zapalne, oraz fototerapię LED (czerwone światło), wspierając naturalne procesy skóry związane z syntezą kolagenu.
- **Efekt:** Skóra staje się jędrniejsza, bardziej elastyczna i napięta. Zmarszczki są mniej widoczne, a cera wygląda promiennie i wypoczęta. Regularne stosowanie poprawia gęstość skóry i opóźnia procesy starzenia.
- **Częstotliwość stosowania:** 1 raz w tygodniu.
- **Zalecane preparaty:** Serum lub ampułki z kolagenem, peptydami i składnikami przeciwstarzeniowymi, wspomagające regenerację skóry.